

LA FÉRULA QUE PROTEGE TUS DIENTES CONTRA EL BRUXISMO


El nuevo **Bruxistop DÍA** es un sencillo dispositivo cuya función principal es interponer entre la dentadura superior e inferior una barrera de dureza intermedia, evitando así el roce directo entre los dientes **siendo, por tanto una eficaz solución para los efectos adversos del bruxismo.**




CLASIFICADO COMO PRODUCTO SANITARIO

Bruxistop DÍA es el dispositivo que impide que la dentadura superior entre en contacto directo con la dentadura inferior, por lo que evita que se produzca el desgaste del esmalte por el frotamiento, y a la vez interpone una lámina de material amortiguador que reducirá los efectos de presionar una mandíbula contra otra.

Su nuevo diseño, **ahora más liviano**, hace que se conjuguen perfectamente comodidad y facilidad de uso para toda la jornada. **Bruxistop DÍA** está fabricado con material totalmente hipoalergénico, libre de agentes tóxicos como: bisfenol A (BPA), f-talatos, látex o acrílicos. Dotado de ranuras para poder cortar y ajustar más y mejor el dispositivo a tu dentadura incluso para dentaduras pequeñas de niños.

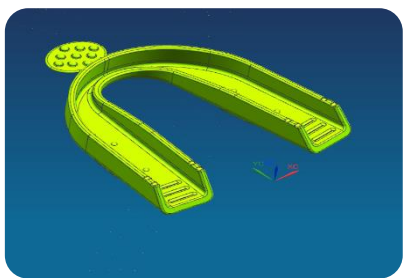

NUEVO DISEÑO

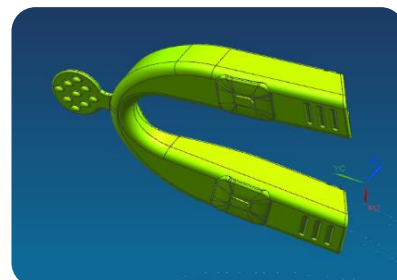

Termoconformable

El nuevo dispositivo **Bruxistop DÍA** se presenta embolsado, dentro de una caja protectora junto con su folleto de instrucciones, la caja protectora puede ser utilizada de continente para usos posteriores a la retirada del embolsado original. Fabricado bajo las más estrictas normas sanitarias, Best Breathe Company, s.l. está certificado en la norma ISO 9001.


Se adapta a tus dientes en menos de un minuto
www.best-breathe.com



Bruxistop DÍA se personaliza en menos de un minuto: sujetando el dispositivo por el asa que tiene en la parte delantera con unas pinzas o tenazas, sumergirlo en el agua caliente y mantenerlo dentro del agua durante unos segundos hasta que note que la férula empiece a “descolgarse” y reblandecerse.

Con el dispositivo caliente, colocarlo en la dentadura superior teniendo mucho cuidado de no “pisar” las paredes de la férula con los dientes y muelas y que quede bien centrado.

Con la boca cerrada, pero sin apretar, succionar fuertemente durante unos segundos para eliminar el aire que hay entre el dispositivo y la dentadura al mismo tiempo que se presionan los labios con las puntas de los dedos para que la férula coja la forma de los dientes por el exterior y presionar con la lengua para ajustar la parte interior hasta que el dispositivo se temple. Finalmente enfriar con agua del grifo.

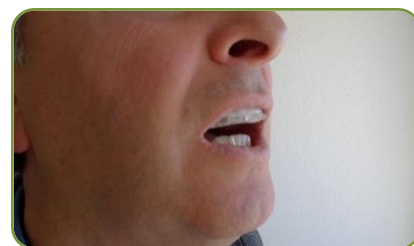

Bruxistop DÍA se comercializa en cajas de 12 unidades, con un peso de 520gr y unas medidas de 26x9.5x13.5cm La caja de transporte contiene 12 cajas de 12 unidades: 144 unidades, con unas medidas de 60x29x27 cm y un peso de 6,250Kg.

La férula que protege tus dientes durante todo el día